

SPECIFIC

2.9

By DRIVE


IMPLANT MONOBLOC Ø 2.9

Résistance mécanique optimale



CONNECTIQUE HEXAGONE EXTERNE

One STEP Implant
Respect distance biologique
Absence de joint au niveau osseux
Etat de surface usiné

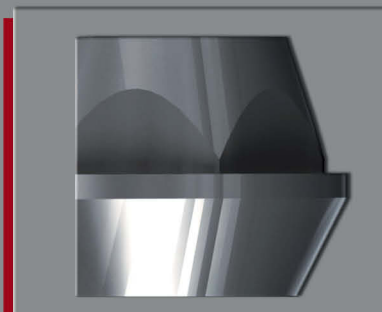


COL

CORPS




Corps cylindro bi-conique
Profondeur variable et progressive
des filets
Effet compressif pour une excellente
stabilité primaire

ETAT DE SURFACE

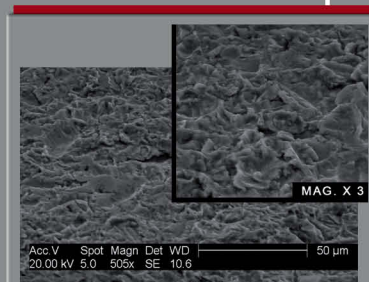

Etat de surface rugueux ostéo-conducteur
Technologie alumine
(Ra = 1µ)

APEX ATRAUMATIQUE

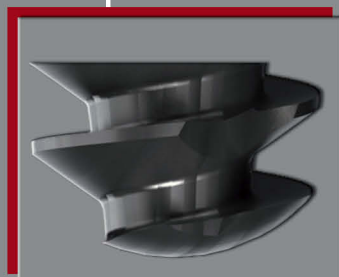

Pilotage de l'implant dans
le puits de forage
Effet autotaraudant-comprimant
Mise en place sous-sinusienne

LA GAMME



SPECIFIC Ø 2.9

L : 8 / 10 / 12 / 14


UN IMPLANT : DE 'MULTI' OPTIONS PROTHÉTIQUES

Une gamme prothétique complète,
optimisée pour la gestion de la prothèse vissée, scellée et amovible

GAINÉ CALCINABLE
ROTATIONNELLE MULTI




TRANSFERT
MULTI

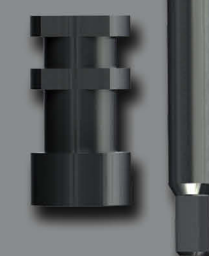

RÉPLIQUE SYSTÈME
MULTI



PROLONGATEUR
GINGIVAL

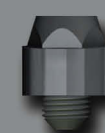


PILIER ANGULÉ
15° MULTI



COIFFE
DE COUVERTURE



PILIER DROIT
MULTI

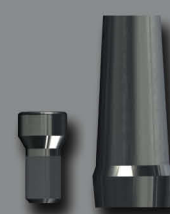


PILIER PROVISOIRES :
ROTATIONNEL ET ANTIROTATIONNEL MULTI



SYSTÈME BOULE
MULTI



GAINÉ TRANSFERT CALCINABLE
ANTIROTATIONNELLE MULTI

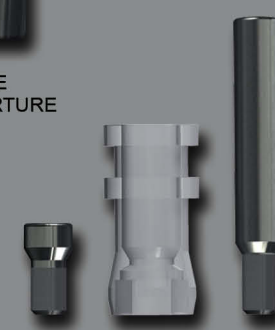

FORET POINTEUR


POINTEUR
Ø 2.2 H5



- Foret permettant le marquage du site implantaire avant le passage du foret MAGIC 2.9
- Profondeur de forage 5 mm
- Comporte une butée pour une préparation sécurisée du site

FORET MAGIC™

MAGIC 2.9

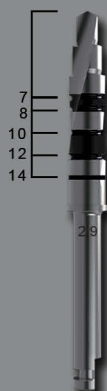


- Foret étagé permettant une préparation du site implantaire et optimisant la stabilité primaire de l'implant
- Foret à irrigation externe
- Récupérateur d'os
- Marquage laser facilitant le forage

ALESOIR 'HB'

Hard Bone 2.9



- Alésoir spécial os dur (D1/D2) permettant un suralésage du puits implantaire pour faciliter la mise en place des implants
- Profondeur d'alésage visualisée par marquage laser
- Récupérateur d'os

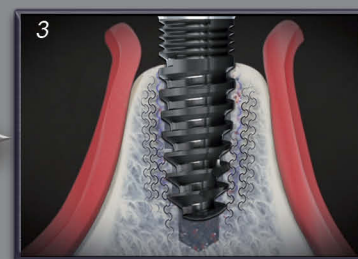

Les paliers formés par le foret Magic™ vont permettre à l'os de se **compresser** autour du corps de l'implant lors du vissage de celui-ci, optimisant ainsi sa **stabilité primaire**



Alésoir 'HB' : Illustration du suralésage du puits implantaire dans les os de forte densité (D1/D2)



www.drivimplants.com
contact@drivimplants.com

NORME CE
ISO 9001
ISO 13485